


Uw naasten 24 uur per dag bereikbaar

Ingebruikname Kompy Watch 4G Personenalarmering

1. Zorg dat de Kompy Watch 4G is opgeladen:

- Sluit de USB-kabel van het oplaadstation aan tussen het oplaadstation en de adapter.
- Plaats het horloge in het oplaadstation zodat de oplaadpunten contact maken.

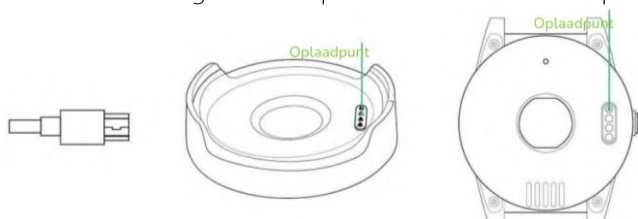

- U krijgt nu een gesproken bevestiging "Uw horloge wordt opgeladen". In het scherm van de Kompy Watch. 4G zal een oplaadindicator verschijnen. Het duurt ongeveer twee uur om de Kompy Watch 4G volledig op te laden.

2. Zet de Kompy Watch 4G aan door de knop aan de zijkant kort in te drukken of door het scherm aan te raken.

3. Zorg dat de contactpersonen/hulpverleners de Kompy-app hebben geïnstalleerd en zijn ingelogd met de verstrekte inloggegevens. **⚠ Het is belangrijk dat te allen tijde minimaal één hulpverlener is ingelogd in de Kompy-app! Dit om te voorkomen dat hulpoproepen niet worden signaleerd.**

4. Maak een testalarm door de alarmknop aan de zijkant van het horloge 3 seconden ingedrukt te houden. De Kompy Watch 4G zal gaan trillen en hoort u een gesproken melding "Het alarm is geactiveerd." Na ongeveer 10 seconden (gedurende deze tijd kunt u het alarm annuleren door op het kruisje te drukken) worden de meldingen naar de smartphone-apps van de gekoppelde contactpersonen/hulpverleners gestuurd.



5. Zolang een alarm niet geaccepteerd én afgehandeld is door een (van de) hulpverlener(s) blijft de Kompy Watch 4G in alarmstand staan. Als het alarm is geaccepteerd door een hulpverlener kan een spreek-/luisterverbinding worden gemaakt, zodat een gesprek gevoerd kan worden.

Neem bij vragen of het wijzigen van contactpersonen/hulpverleners contact met ons op. Wij zorgen dan dat de hulpverlener-accounts worden gekoppeld aan de Kompy Watch 4G zodat alarmmeldingen naar de gekoppelde smartphone-apps worden gestuurd.